


## הוראות תחזוקה מחולל חמצן IGO2

### נא להקפיד על הוראות השימוש!

#### סוללה

- הסוללה מחזיקה כ-3 שעות בשימוש של 2 ליטר פולסים לדקה.
- בעת קבלת המכשיר הסוללה נעולה, לכן יש להכניסה למכשיר ולחברו לחשמל. חיבור המחולל לחשמל יבטל את נעילת הסוללה.
- אין להטעין את הסוללה יותר מ-4 שעות. הטענת יתר הורסת את הסוללה.
- כבל הרכב אינו מטעין את הסוללה, הוא שומר על רמת הטעינה כפי שהיא.
- על מנת לבדוק את תכולת הסוללה יש ללחוץ על הכפתור שבתחתית הסוללה.

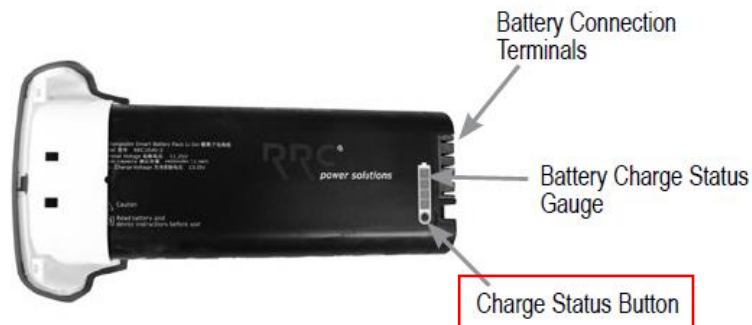


#### המכשיר

- בהפעלת המכשיר נדלק חץ ירוק כלפי מטה המצביע על כך שרמת החמצן טרם התייצבה. לוקח כ-15 דקות לחמצן להתייצב.
- ברגע שהתייצב החמצן (הגיע לערך תקין של 91% +/- 3) יופיע "V" בצבע ירוק.
- להפעלת סמארט דוס- לחיצה 2 הכפתורים (+) ו- (-) smart-dose- יש 4 דרגות. המכשיר מזהה מאמץ נשימתי ומס' הנשימות עולה מהערך הנורמאלי ומעלה את וויסות החמצן.

## כללי ואזהרות

- אוורור המחולל מגיע עד 60 מעלות. לכן אין לכסות את פתחי האוורור ואין להצמידו לגוף מחשש לכוויה.

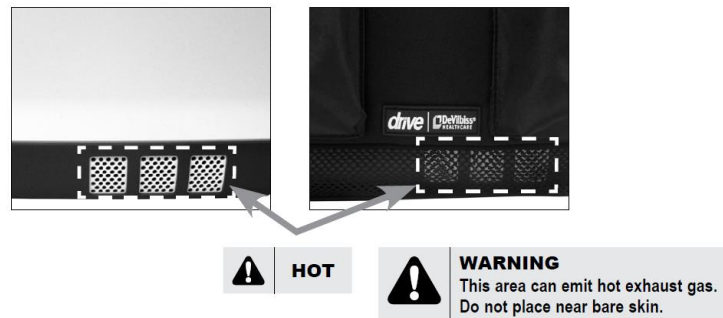

- יש להקפיד שהמכשיר תמיד נמצא במצב "עומד" – כלומר אין להשכיב את המכשיר או להניח אותו על הצד.
- לא מומלץ להפעיל את המכשיר לשימוש של פחות מחצי שעה.
- אין להשאיר את הסוללה ברכב, בשמש או בקרבת חום כלשהו.
- יש להקפיד שצינורית החמצן נשארת ישרה ללא כיפופים/קיפולים. צינורית מכופפת גורמת נזק למכשיר.
- המכשיר מאושר להטסה.
- אין להפעיל את המכשיר בסביבה לחה (בחדר רחצה/בגשם/מול מזגן).

## SYMBOL DEFINITIONS

	Danger - No smoking near patient or device. ⓘ This symbol has a red circle and diagonal bar on the product label.		Power Button		Direct Current (DC Power)		Alarm Silenced
	It is mandatory to read and understand the operating instructions prior to use. ⓘ This symbol has a blue background on the product label.		Increase Prescription Setting Button		Class II electrical protection – double insulated		TUV Rheinland
	Do not use near heat or open flames. ⓘ This symbol has a red circle and diagonal bar on the product label.		Decrease Prescription Setting Button		Type BF applied part		Manufacturer
	Do Not Disassemble ⓘ This symbol has a red circle and diagonal bar on the product label.		Battery Status Indicator Symbol		Catalog Number		European Representative
	Use no Oil, Grease or Lubricants ⓘ This symbol has a red circle and diagonal bar on the product label.		Normal Oxygen (Green)		Serial Number		European Rep CE Mark
	RTCA / DO-160G Section 21 Category M and Section 20 Category T - The manufacturer of this POC has determined this device conforms to all applicable FAA acceptance criteria for POC carriage and use on board aircraft. ⓘ Text shown with this symbol is red on the product label.		Low Oxygen (Yellow)		No MR (MR Unsafe) Unsafe for Magnetic Resonance Environment		
	General Warning ⓘ This symbol is used throughout this manual to indicate hazardous situations to avoid.		Service Required (Red)		Federal (U.S.A.) law restricts this device to sale by or on the order of a physician		
	Important Information ⓘ This symbol is used throughout this manual to indicate important information you should know.		IP22		IP22 Ingress Protection - Protected against finger access to hazardous parts; protected against vertically falling water drops when enclosure is tilted up to 15°		
	Note and Information Symbol ⓘ This symbol is used throughout this manual to indicate notes, useful tips, recommendations and information.				This device contains electrical and/or electronic equipment that must be recycled per EU Directive 2012/19/ EU- Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)		

במקרה הצורך, שירות יינתן במשרדי החברה.